


Guía rápida del Motif Aura Glow™

1. Botones y funciones


- A** Botón de encendido de la luz nocturna
- B** Reducción del nivel (succión)
- C** Botón Reproducir/Pausa
- D** Aumento del nivel (succión)
- E** Botón de modo
- F** Indicador de nivel
- G** Pantalla de potencia
- H** Hora/minuto
- I** Indicador de la hora

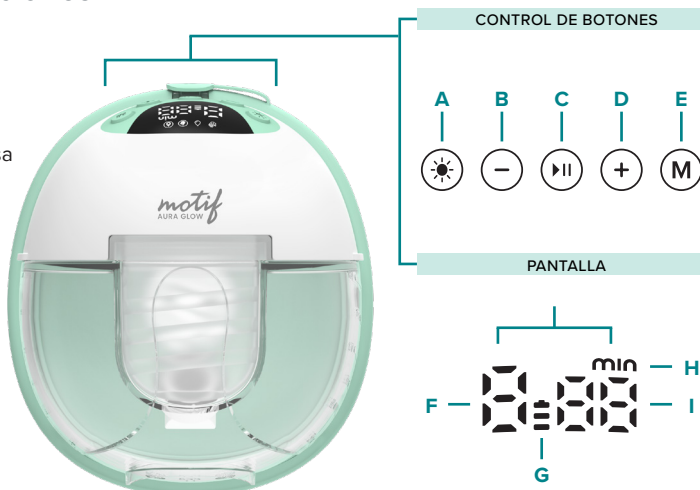

2. Montaje del sacaleches Motif Aura Glow™

Montaje del sacaleches

1. Lávese las manos antes de tocar los componentes del sacaleches.
2. Instale la válvula y el diafragma en el recipiente colector.
3. Coloque el protector mamario en el recipiente de recogida, presionando los bordes para sellarlo.
4. Introduzca un inserto de brida en el protector mamario si lo utiliza.
5. Conecte el motor del sacaleches al recipiente de recogida.

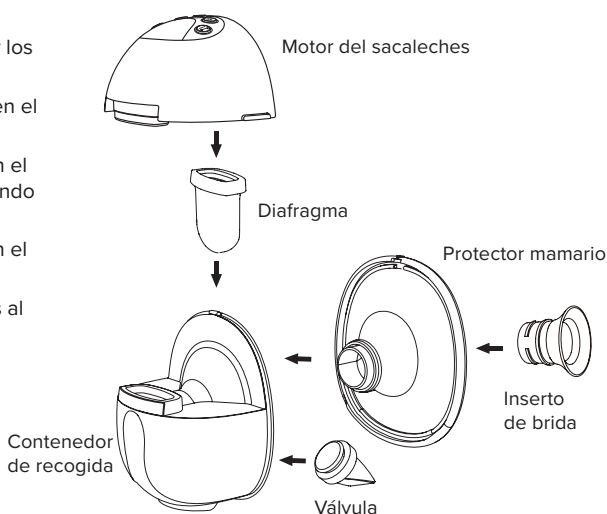


3. Extracción de leche

1. Mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSAR para poner en marcha el sacaleches. La pantalla se iluminará.
2. Pulse brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR para poner en marcha el sacaleches. Pulse el botón MODO para cambiar de modo después de arrancar el sacaleches..
 - Modo de masaje, extracción y bombeo general: 1~9 niveles
 - Modo de alimentación en bloques: 1~5 niveles
3. Pulse brevemente el botón de encendido de la luz nocturna para encenderla y comprobar los niveles de leche.
4. Mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSAR para apagar el sacaleches.

4. Después de la extracción

1. Cuando termine la extracción, mantenga pulsado el botón REPRODUCIR/PAUSAR para apagar el extractor y deslice un dedo entre el pecho y el protector mamario para separarlos. Retire con cuidado el extractor del pecho manteniéndolo en posición vertical.
2. Tire suavemente hacia atrás de la parte superior del protector mamario y extraiga el motor del recipiente de recogida utilizando las aletas laterales.
3. Retire el tapón del pico vertedor. Para evitar que se derrame la leche, alinee con cuidado el pico vertedor con la botella y vierta la leche en la botella.

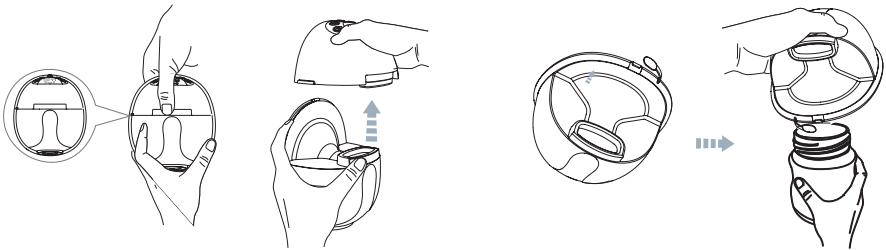

5. Advertencias y precauciones



ADVERTENCIA: Situación potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones graves.



PRECAUCIÓN: Situación posiblemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales leves.



Fabricado para:
Motif Medical®, LLC
8 The Green, Suite 5601
Dover, DE 19901

Phone: (844) 272-8390
Email: info@motifmedical.com
Web: www.motifmedical.com

motif
AURA GLOW™