

O **PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX®**, foi desenvolvido para fixação do conjunto osso-tendão-osso e enxertos de tecidos moles, na reconstituição dos Ligamentos das Articulações do Joelho, por meio de técnicas de artroscopia ou artrotomia.

SINFIX, O PARAFUSO DE INTERFERÊNCIA QUE REÚNE AS **MELHORES CARACTERÍSTICAS:**



ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Chave com encaixe que proporciona a distribuição homogênea do torque, ao longo de todo o corpo do parafuso SINFIX.



ABSORÇÃO RÁPIDA E SEGURA

Furos axiais ao longo do parafuso SINFIX em PLDL, otimizam sua absorção.




RÁPIDA INSERÇÃO

Exclusiva rosca de dupla entrada (permite a colocação do parafuso SINFIX com metade do número de voltas).
A extremidade do parafuso SINFIX com formato cônico e filete mais agudo, facilita a sua inserção!



PRESERVA A INTEGRIDADE DO ENXERTO

Corpo do parafuso com formato cilíndrico e filetes de perfil arredondados, aliados à inserção com a metade do número de voltas (característica exclusiva do SINFIX), preservam a integridade do enxerto.

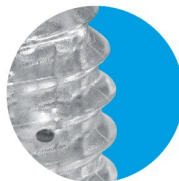

Especificações Técnicas

PLDL

- Produzido em P(L/DL)LA, com propriedades superiores de degradação;
- Sofre degradação por reações de hidrólise, permitindo a formação e crescimento de novo tecido ósseo no local;
- Produzido 100% em sala limpa, classe ISO 8.

TCP

- Parafuso produzido de um composto formado por PLDL, com adição de 30% de B-TCP, maximizando os efeitos de Osteointegração, Osteoindução e Biodegradação;
- Produzido 100% em sala limpa, classe ISO 8.



Modelos de parafusos de interferência SINFIX®

PRODUTO	REGISTRO ANVISA	MODELOS COMERCIAIS	RG
PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL	80739420003	PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 06x15	1232216
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 06x23	1234463
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 07x25	1188955
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 08x25	1204735
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 08x30	1204736
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 09x25	1204737
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 09x30	1204738
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 10x25	1204739
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 10x30	1204740
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® PLDL 11x30	1204741
PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP	80739420004	PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 07x25	1200246
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 08x25	1204728
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 08x30	1204729
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 09x25	1204730
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 09x30	1204731
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 10x25	1204732
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 10x30	1204733
		PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX® TCP 11x30	1204734

INSTRUMENTAIS PARA PARAFUSOS DE INTERFERÊNCIA SINFIX



PRODUTO	REGISTRO ANVISA	MODELOS COMERCIAIS	RG
CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA SINFIX®	80739420001	CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA 6-7-8	1200308
ACESSÓRIO EXTRATOR CHAVES PARAFUSOS SINFIX®		CHAVE PARAFUSO INTERFERÊNCIA 9-10-11	1201429
		EXTRATOR CHAVES PARAFUSOS SINFIX®	1247547
MACHEADOR PARAFUSOS SINFIX®	80739429003	MACHEADOR PARAFUSOS SINFIX®	1234771

PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE A INSTRUÇÃO DE USO ACESSANDO NOSSO PORTAL:

www.sintegrasurgical.com.br

SINTEGRA SURGICAL SCIENCES LTDA.
Rua Dr. Luiz Miranda, 1750
Pirajá
CEP 17.580-000
Pompeia/SP

Serviço de apoio ao distribuidor:
(14) 3405-2373
sintegra.sac@sintegrasurgical.com.br

SINFIX®