


ZOLL AED 3 が自動セルフ テストを実行します。セルフ テストの実行中、パッケージ上のラベルが手前に来るように、AED の背面に CPR Uni-padz II を挿入します。

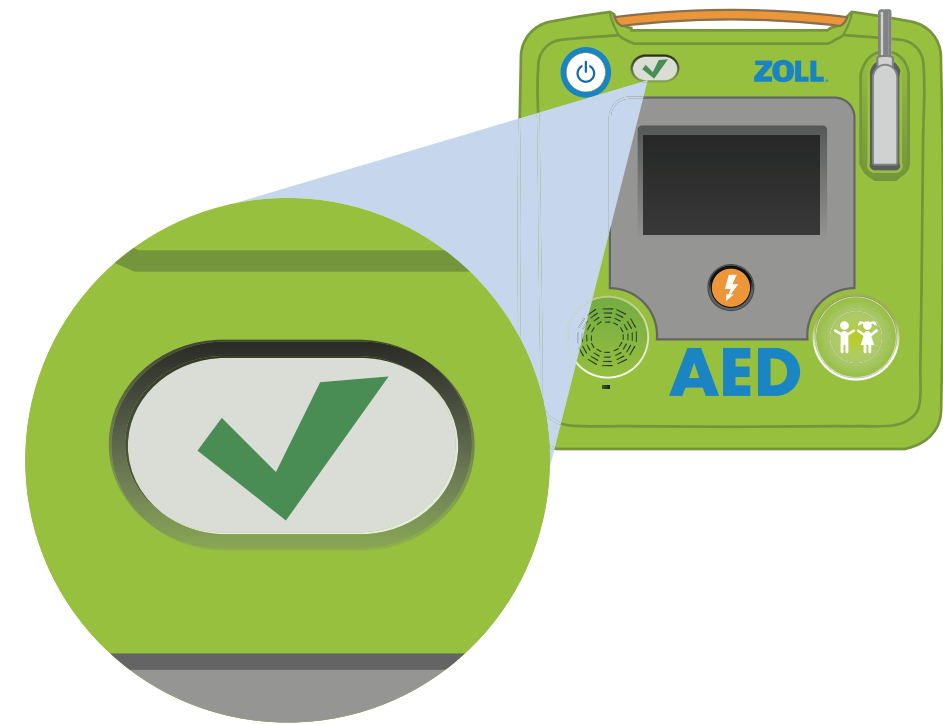

AED 3 セルフ テストの完了後、「AEDは正常です」という音声メッセージを聞くか、ステータス インジケータ ウィンドウで緑色のチェック マークを見ることで、テストに合格したことを確認します。これで、AED 3 は使用可能な状態です。不明な点がある場合は、ドキュメントフォルダに付属の取扱説明書を参照してください。